




<b>LOT</b>	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie

### Producent

REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 594 03 00,

fax.: +48 22 594 03 07

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

Nr katalogowy.: RF-881



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
www.nowaszkoła.com

tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!





1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. Linka u urzędnieniu stwarza ryzyko uduszenia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



# Przyrząd do ćwiczeń kończyn górnych RF 0001

**Wiek**

■ 3+

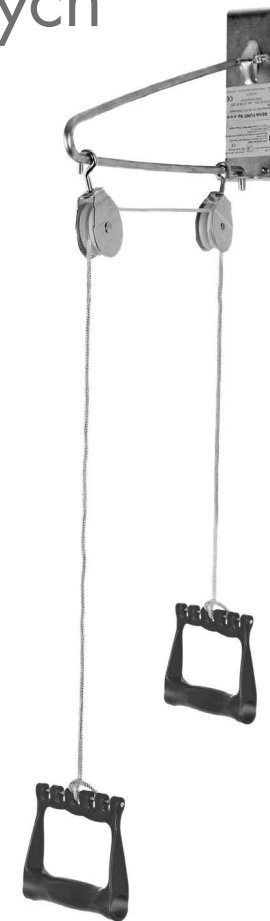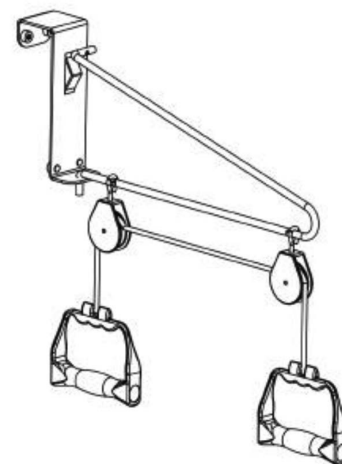

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**Uwaga!** Przed rozpoczęciem korzystania z przyrządu, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

Waga: 0,75 kg

### Przeznaczenie

Przyrząd przeznaczony jest do ćwiczeń kończyn górnych, barków i górnej części tułowia. Pomaga w odbudowie zakresu ruchów i zwiększania ruchliwości w stawach kończyn górnych i górnej części tułowia. Opór dla jednej kończyny stanowi ciężar drugiej kończyny.

SI IN RF 0001 07/22

## Zasady bezpieczeństwa

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed korzystaniem z przyrządu upewnić się, że:
  - a. wiązania na linie są ciasne;
  - b. linka nie jest wystrzępiona;
  - c. linka znajduje się w rowkach bloczka i porusza się swobodnie;
  - d. linka nie znajduje się pomiędzy bloczkiem a wieszakiem w kształcie litery V.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie przyrządu w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przechować w temperaturze poniżej 0°C.

**Uwaga!** Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

## Części przyrządu

Przyrząd składa się z:

1. wieszaka w kształcie litery V;
2. wspornika drzwi;
3. dwóch bloczków;
4. linki;
5. dwóch uchwytów.



## Montaż

1. Zamontuj bloczki na wieszak w kształcie litery V na jego dwóch przeciwległych końcach.
2. Końcówki wieszaka włóż do wspornika drzwi.
3. Przeciągnij linkę przez bloczki.
4. Końcówki linki przeciągnij przez otwory w uchwytach i mocno zawiąż.

5. Zamontuj przyrząd na drzwiach za pomocą wspornika drzwi.
6. Upewnij się, że można bezpiecznie korzystać z przyrządu.

**Uwaga!** Montaż tego urządzenia jest znacznie łatwiejszy i bezpieczniejszy z pomocą drugiej osoby.

## Czyszczenie i konserwacja

1. Zaleca się regularną kontrolę przyrządu pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
2. Zaleca się regularne czyszczenie przyrządu miękką szmatką i wodą z mydłem.
3. Przyrząd po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.

**Uwaga!** Do czyszczenia przyrządu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściągających.

## Wyjaśnienie symboli

	Wytwórca
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji użytkowania
	Ostrzeżenie